

1135P GANT NITRILE SAFETOUCH HEAVY SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation identique au latex.
- Bonne dextérité.
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches grâce aux doigts texturés.
- Sa robustesse lui confère une plus grande durabilité.



Usage prévu:


- Pour les utilisateurs allergiques au latex.
- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur des produits chimiques testés (dont médicaments de chimiothérapie), des particules radioactives et des microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	MEDICOM - SafeTouchHeavy - Glove
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Bleu clair
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Longueur :	≥240 mm
Poudré :	Non
Poids unitaire (M) :	7,0 g
Épaisseur (paume/doigt/manchette):	0,11 mm/0,14mm/0,11mm ± 0,02mm
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1135P-A	T 6	XS
1135P-B	T 7	S
1135P-C	T 8	M
1135P-D	T 9	L
1135P-E	T 10	XL

Marquage sur conditionnement:

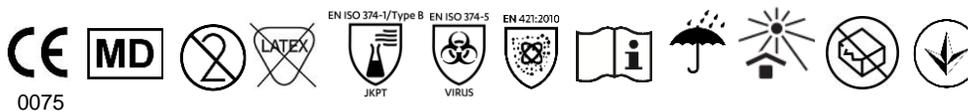

INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Santé / Médical / Cancérologie / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche

1135P GANT NITRILE SAFETOUCH HEAVY SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus, EN 421 et ASTM D6978-05.

Produits chimiques testés	N°CAS	Lettre	Perméation (niveau de performance)
n-heptane	142-82-5	J	2 (> 30 min)
Hydroxyde de sodium 40 %	1310-73-2	K	6 (> 480 min)
Peroxyde d'Hydrogène 30 %	7722-84-1	P	3 (> 60min)
Formaldéhyde 37%	50-00-0	T	6 (> 480 min)

☞ Voir la notice d'information pour les performances relatives aux médicaments de chimiothérapie, selon la norme ASTM D6978-05.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil , doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette
1135P-A	465 x 270 x 235	7,5	54
1135P-B	465 x 270 x 235	8,0	54
1135P-C	465 x 270 x 235	8,5	54
1135P-D	465 x 270 x 235	9	54
1135P-E	465 x 270 x 235	9,5	54



Caractéristiques boîte distributrice

Taille mm	Cdt
225 x 130 x 90	10 x 100
225 x 130 x 90	10 x 100
225 x 130 x 90	10 x 100
225 x 130 x 90	10 x 100
225 x 130 x 90	10 x 100

Code couleur boîte et carton

Couleur

1135P GANT NITRILE SAFETOUCH HEAVY SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

INFORMATIONS LOGISTIQUES (suite)

 Codes EAN

Article	Carton	Boite distributrice
1135P-A	3 662 036 023 223	3 662 036 023 179
1135P-B	3 662 036 023 230	3 662 036 023 186
1135P-C	3 662 036 023 247	3 662 036 023 193
1135P-D	3 662 036 023 254	3 662 036 023 209
1135P-E	3 662 036 023 261	3 662 036 023 216