

## 1144 GANT NITRILE KOLMI COVERFEEL CARE LONG - SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sans accélérateur pour limiter les allergies de type IV.
- Gant ultra confortable à manchette longue et enfilage plus rapide grâce à son revêtement polymère interne.
- Grande élasticité et bonne dextérité.
- Texture non glissante pour une excellente préhension et manipulation des objets.
- Sa robustesse lui confère une plus grande durabilité.
- Manchette longue pour une protection optimisée.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.



### USAGE PRÉVU

- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant, le patient et leur environnement. Protection testée (perméation) contre de nombreux agents de chimiothérapie (oncologie).
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur des produits chimiques testés (type B), des particules radioactives et des microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Sans latex naturel, ce gant est recommandé pour les personnes allergiques à celui-ci.
- Ce gant est apte au contact alimentaire pour tous type de denrée.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Kolmi Coverfeel Care Long
Type de produit :	Gant à usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,10 mm (±0,02mm)
Épaisseur du doigt :	0,11 mm (±0,02mm)
Longueur du gant :	≥ 290 mm ≥ 300 mm pour XL & XXL
Poids unitaire (M) :	6g
AQL:	1,5
Pays de fabrication :	FRANCE  
Conditionnement:	Boîte de 100uc - Tailles S, M & L Boîte de 90uc - Tailles XL & XXL

Article	Taille	
1144-B	T7	S
1144-C	T8	M
1144-D	T9	L
1144-E	T10	XL
1144-F	T11	XXL

## CERTIFICATIONS & NORMES

- Conçu et distribué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.
- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux.
- Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.
- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.
- Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, EN 16523-1, ISO 16604 pour les produits chimiques testés (type B) et les micro-organismes dont les virus. EN 421 pour la protection contre les particules radioactives.
- Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tous type de denrée.
- Testé selon l'ASTM D6978-05 pour l'évaluation de la résistance des gants médicaux à la perméation par les médicaments de chimiothérapie testés.
- Propriétés électrostatiques: testé selon les normes EN 1149-1, EN 1149-2 & EN 1149-3 (résultats sur demande).

Données de perméation chimique (EN 16523-1:2015+A1:2018)		
Produits chimiques testés	N° CAS	Niveau de performance/ Temps de traversée
<b>J: n-Heptane</b>	<b>142-82-5</b>	Niveau 5, < 480 min
<b>K: Hydroxyde de sodium 40%</b>	<b>1310-73-2</b>	Niveau 6, > 480 min
<b>T: Formaldéhyde 37%</b>	<b>50-00-0</b>	Niveau 6, > 480 min
Acide sulfurique 50%	7664-93-9	Niveau 6, > 480 min
Hydroxyde de sodium 50%	1310-73-2	Niveau 6, > 480 min
Acide peracétique 5%	79-21-0	Niveau 6, > 480 min
Alcool isopropylique 70%	67-63-0	Niveau 3, < 120 min
<b>P: Peroxyde d'hydrogène 30%</b>	<b>7722-84-1</b>	Niveau 2, < 60 min
Ethanol 70%	64-17-5	Niveau 2, < 60 min
Acide chlorhydrique 37%	7647-01-0	Niveau 1, < 30 min

Résistance aux produits cytotoxiques (ASTM D6978-05)	
Molécules cytotoxiques et concentration	Temps minimal de détection d'un trou
Carmustine (BCNU) - 3.3 mg/ml	54,7 min
Doxorubicin HCl - 2.0 mg/ml	> 240 min
Cyclophosphamide - 20 mg/ml	> 240 min
Paclitaxel - 6.0 mg/ml	> 240 min
Thiotepa - 10.0 mg/ml	65,5 min
Etoposide - 20.0 mg/ml	> 240 min
Fluorouracil - 50.0 mg/ml	> 240 min
Bulsulfan - 6mg/ml	> 240 min
Irinotecan HCl - 20mg/ml	> 240 min
Vidaza (Azacytidine) - 25 mg/ml	> 240 min
Fentanyl citrate injection - 100mcg/2ml	> 240 min
Methotrexate - 25mg/ml	> 240 min
Vincristine Sulfate - 1mg/ml	> 240 min
Ifosfamide - 50mg/ml	> 240 min
Cytarabine HCl - 100mg/ml	> 240 min



## PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## COMPOSITION DU DISPOSITIF

Nitrile – sans sulfure ni accélérateur

Latex: non

BPA: non

Phtalates CMR: non

Produit d'origine animale ou végétale: non


Présence d'oxyde d'éthylène: non

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil.

Durée de vie du produit : 3 ans.

## MARQUAGE SUR LE PACKAGING

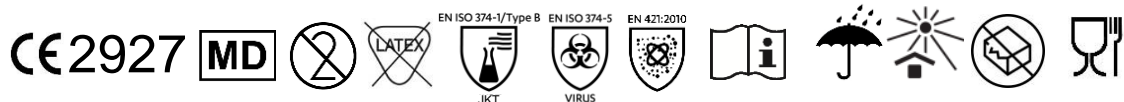

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS BOITE				
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	BARCODE	TAILLE (mm)	QTE / carton	BARCODE		
1144-B	L390 x I285 x H302	7,9	40 cartons (5 couches de 8 cartons)	3 662 036 021 779	L290 x I135 x H73	10 boîtes distributrices de 100 unités	3 662 036 021 717		
1144-C		8,3		3 662 036 021 786			3 662 036 021 724		
1144-D		9		3 662 036 021 793			3 662 036 021 731		
1144-E		9,2		3 662 036 021 809		3 662 036 021 748			
1144-F		9,8				3 662 036 021 816		10 boîtes distributrices de 90 unités	3 662 036 021 755

