



88000, 88005, 88010,
88015, 88025, 88030,
88035, 88040

MEDICOM® SAFESEAL® QUATTRO
SACHETS DE STÉRILISATION


Dispositif Médicale, Classe I selon la norme MDR 2017/745

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour utilisation comme barrière stérile pour les dispositifs médicaux stérilisés à la vapeur et au gaz d'oxyde d'éthylène dans les établissements de santé
- résistant à la perforation, film multi-couches épaisses en polypropylène et en polyéthylène
- Film transparent bleuté facilitant à la fois la visualisation de l'instrument et l'identification des déchirures ou des perforations de la gaine
- Ouverture propre de la soudure sans rupture des fibres de papier pour une préservation de de produits stériles
- Le sachet possède un large adhésif qui le scelle facilement et en toute sécurité, offrant ainsi une bonne étanchéité avant son ouverture
- Les sachets peuvent être conservés plus d'un an après stérilisation (si on respecte les conditions de stockage).



Indicateurs de changement de couleurs :

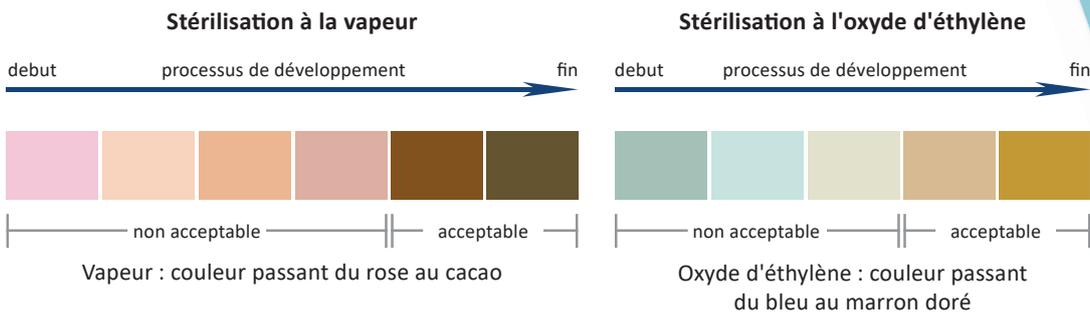

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : SafeSeal® Quattro Sachets de stérilisation
 Type de produit : A usage unique
 Matériel : Papier, polypropylène and polyéthylène
 Papier de qualité médicale : 60 g/m²
 Film : 50 µm

Paramètres de cycle de stérilisation	Autoclave à écoulement de vapeur par gravité		Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Temps (min)	30	4	100 - 120
Température (°C)	121	134	50
Humidité ambiante (%)	N/A	N/A	60 - 85
Concentration en antiseptique	N/A	N/A	600
Drying-Aeration time	15 - 30 min	20 - 30 min	12 hrs

N/A = Non applicable

Pour le guide de l'utilisateur concernant le virage des couleurs, information concernant la Valeur Spécifiée (VS) et tout autre renseignement, consulter www.medicom.com

Origine : Taiwan

RÉF	Taille mm
88000	70 x 229
88005	89 x 133
88010	89 x 229
88015	57 x 102
88025	133 x 254
88030	191 x 330
88035	254 x 356
88040	305 x 432



INDUSTRIES

Médical / Dentaire

88000, 88005, 88010,
88015, 88025, 88030,
88035, 88040

MEDICOM® SAFESEAL® QUATTRO SACHETS DE STÉRILISATION

Dispositif Médicale, Classe I

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C. Durée de vie du produit : 3 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

RÉF	Taille mm	Poids brut kg	QTÉ/ palette
88000	268 x 160 x 202	2,9	180
88005	483 x 173 x 74	2,1	200
88010	298 x 267 x 138	3,7	120
88015	328 x 141 x 138	2,2	285
88025	298 x 298 x 352	10,0	48
88030	328 x 210 x 370	8,5	60
88035	394 x 330 x 267	12,3	42
88040	476 x 337 x 343	17,7	25



Caractéristiques boîte distributrice

Taille mm	QTÉ/ carton
260 x 64 x 76	6 emballages x 200 pcs.
165 x 64 x 95	5 emballages x 200 pcs.
260 x 64 x 95	6 emballages x 200 pcs.
133 x 64 x 64	10 emballages x 200 pcs.
286 x 64 x 140	10 emballages x 200 pcs.
362 x 64 x 197	5 emballages x 200 pcs.
387 x 64 x 260	5 emballages x 200 pcs.
464 x 64 x 311	5 emballages x 200 pcs.

Codes EAN

RÉF	Boîte distributrice	Carton
88000	8718007911978	8718007011975
88005	8718007911985	8718007011982
88010	8718007911992	8718007011999
88015	8718007912005	8718007012002
88025	8718007912012	8718007012019
88030	8718007912029	8718007012026
88035	8718007912036	8718007012033
88040	8718007912043	8718007012040



Medicom Healthcare B.V.
Parallelweg 80a | 3931 MT Woudenberg | Pays-Bas
cs@medicom-eu.com | +31 332 866 460